

Guide d'utilisation rapide



www.wheeme.com
LOGICOM

www.wheeme.com
LOGICOM

Table des matières

1. Spécifications et contenu de la boîte.....1
2. Déclaration de conformité.....2
3. Conditions d'utilisation.....2
4. Description du produit.....3
5. Guide de démarrage rapide4
6. Utilisations avancées.....7
7. Précautions d'emploi.....11
8. Nettoyage.....15
9. Recyclage.....15
10. En cas de problème.....16
11. Conditions de garantie.....16

Spécifications techniques

Couleur : Blanc/bleu, Blanc/rouge
 Taille: 128mm x 96mm x 80mm
 Poids: 330g avec piles
 Vitesse: 1.2"/sec (3cm/sec)

Contenu de la boîte

1. Un robot de Massage WheeMe.
2. Une tige en nylon détachable
3. Un manuel d'utilisation
4. Une carte de garantie
5. Une vis de fixation trappe piles

2 Déclaration de conformité

Nous déclarons que le produit robot de massage WheeMe importé par LOGICOM – 55 Rue de Lisbonne 75008 PARIS est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes:


- EMC : EN 55014-1:2006 /A2: 2011
- EN 55014-2:1997 /A2: 2008
- RoHS 2 : 2011/65/EU
- REACH : 1907/2006
- EMF : EN 62233:2008
- LVD : EN60335-2-32:2003/A1:2008



3 Conditions d'utilisation


Ce produit est destiné à un usage non-professionnel procurant d'agréables massages sur la peau. Ce produit est conçu uniquement pour un usage domestique. Quand vous utilisez un appareil électrique, les précautions d'utilisation doivent être respectées. **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.**

4 Description du produit

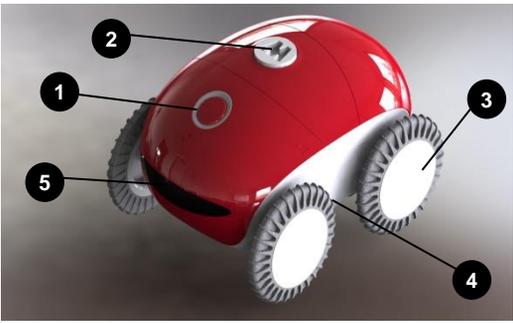

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Bouton ON/OFF & MODE | 4 Compartiment piles |
| 2 Emplacement du bras massant | 5 Capteur |
| 3 Roues détachables | 6 Axe des tiges en nylon |
| | 7 Tiges en nylon |

4 Tiges en nylon

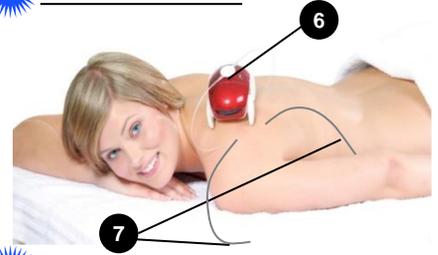

5 Guide de démarrage rapide

Enlevez la trappe piles située sous le produit à l'aide de votre doigt ou d'un tournevis plat si l'ouverture s'avère difficile.

Insérez 3 piles AA de 1,5V dans le compartiment à piles Munissez-vous d'un petit tournevis cruciforme pour fermer ce compartiment à l'aide de la vis fournie dans la boîte.



5 Guide de démarrage rapide

Appuyez sur le bouton **ON/OFF** : Allumez le robot (un voyant rouge autour du bouton vous indique que l'appareil est sous tension).

Lorsque le robot est allumé, il démarre directement sur le Mode 1, vous pouvez changer de programme à l'aide du bouton **ON/OFF** (un voyant vert clignotant autour du bouton vous indique dans quel mode vous vous trouvez).

- Mode 1 : Fort,** (Ne pas installer la tige en nylon dans ce mode) Mode par défaut, le robot vibre en progressant sur la zone de massage. Le voyant vert clignote rapidement.
- Mode 2 : Doux,** (Installez la tige en nylon), Le bras massant tourne sur lui-même pendant que le robot progresse sur la zone de massage. Le voyant vert clignote lentement.
- Mode 3 : Caresse,** (Ne pas installer la tige en nylon) Le robot progresse sur la zone de massage (Le voyant vert reste allumé).

5 Guide de démarrage rapide

Remarque : Pour une utilisation en mode 2 et 3 il est conseillé de ne porter aucun vêtement sur la zone de massage pour mieux ressentir le massage des roues et de la tige en nylon

Allongez- vous sur le ventre comme ci-dessous



Placez le WheeMe sur votre dos, il va commencer à masser et à se déplacer sur votre dos. Le WheeMe démarre une séquence et s'arrête automatiquement au bout de 15minutes.

Pour arrêter le WheeMe, vous devez maintenir enfoncé le bouton **ON/OFF** pendant quelques secondes jusqu'à extinction des moteurs.

Indication : Le voyant vert clignote rapidement puis les voyants vert et rouge s'éteignent.

6 Utilisations avancées

1. Lorsque vous êtes en Mode 3 : Dancing, si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton **ON/OFF**, le WheeMe retourne en Mode1 : Fort.
2. Chaque appui sur le bouton mode redémarre une session de 15 minutes même si vous étiez déjà en cours de session.
3. Le WheeMe entre en mode pause lorsque vous le mettez à l'envers (Voir photo ci-dessous). Le WheeMe redémarre lorsque vous le remettez à l'endroit



4. Le WheeMe s'arrête automatiquement lorsque le niveau des piles est faible.

6 Utilisations avancées

5. Le WheeMe dispose d'une fonction économie d'énergie pour les piles lorsqu'il est éteint.
6. Lorsque vous essayez d'allumer le WheeMe alors que la charge des piles est trop faible, le voyant vert clignote rapidement pendant un court moment puis le WheeMe s'éteint automatiquement.
7. Durant le massage, il est possible de forcer le WheeMe à grimper sur vos épaules pour pouvoir l'attraper facilement avec vos mains. Pour cela relevez-vous lentement sur vos coudes comme indiqué sur la photo ci-dessous, le WheeMe grimpe alors automatiquement vers votre cou.



7 Précautions d'utilisation

2. Si vous ne suivez pas les instructions d'utilisation, le WheeMe risque de souvent tomber de la zone de massage.
3. Le WheeMe est fragile. Évitez de le laisser tomber par terre. Pour éviter toute casse, nous vous conseillons de vous allonger sur une surface souple (matelas, tapis...) durant l'utilisation du WheeMe
4. La tige en nylon du WheeMe est très fragile. Prenez en soin lors de son utilisation et stockage.
5. Le WheeMe ne peut détecter que les courbes d'un dos humain. Il n'est pas conçu pour fonctionner sur des surfaces dures ou pour détecter le bord d'une table.
6. Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'utilisation du WheeMe sur ou près des enfants, des invalides et des personnes handicapées
7. Le WheeMe contient de petites pièces. Conserver le à l'écart des enfants de moins de 3 ans.

8 Nettoyage

Il est très facile de nettoyer le WheeMe. Il suffit simplement de retirer le bras massant et les roues. Nettoyez les avec un chiffon humide, faite attention à bien retirer les cheveux enroulés autour de l'axe des roues. Remettez en place les roues, vous pouvez maintenant redémarrer et profiter du WheeMe



9 Recyclage

Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujetties à la directive 2012/19/CE du 4 Juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

6 Utilisations avancées

ATTENTION : Veillez à utiliser le WheeMe en position allongé le plus à plat possible sinon le WheeMe risque de tomber de votre corps.

Mode aventure :

Le WheeMe possède un mode aventure qui lui permet de couvrir une zone de massage plus grande.

ATTENTION : La zone de massage étant plus étendue, le WheeMe risque de tomber plus facilement de votre corps.

Pour basculer en mode aventure, il vous suffit de positionner votre WheeMe à la verticale comme sur la photo ci-dessous et de sélectionner en même temps le programme désiré à l'aide de la touche **ON/OFF**.



7 Précautions d'utilisation

8. Le WheeMe n'est pas destiné aux personnes malades, aux bébés ou aux femmes enceintes.
9. Le WheeMe n'est pas immersible, veuillez le conserver et l'utiliser à l'écart de l'eau.
10. Le WheeMe n'est pas destiné à un usage médical ou professionnel. Il est conçu pour procurer des massages doux et apaisants. Ne pas utiliser ce produit en tant que substitut médical.
11. Il est recommandé d'utiliser le WheeMe par session de 15 minutes à la fois et de le laisser refroidir entre les sessions.
12. Le WheeMe ne doit JAMAIS être utilisé par une personne souffrant de mal de dos ou d'une maladie physique qui limiterait la capacité de l'utilisateur à utiliser les commandes du produit.
13. L'utilisation du WheeMe est de la responsabilité de l'utilisateur seul. Il doit être utilisé de façon appropriée et conformément aux instructions.
14. S'il vous plaît, pensez que les roues du WheeMe peuvent se prendre dans les vêtements ou les matières délicates portés par l'utilisateur.

10 En cas de problèmes

1. **Mon WheeMe ne s'allume pas ou s'éteint après une courte utilisation** : Remplacez les 3 piles AA. Pour de meilleures performances, n'utilisez pas de piles bon marché. Pour une utilisation fréquente, nous vous recommandons des piles AA 1,2V rechargeables
2. **Mon WheeMe tombe souvent du corps lorsque je l'utilise comme décrit dans ce guide** : Vos piles sont déchargées, remplacez les 3 piles AA.
3. **Mes cheveux sont coincés dans les roues du WheeMe** : Arrêtez le WheeMe, enlevez les roues comme décrit dans le chapitre « Nettoyage » pour retirer vos cheveux.

En cas de problème, un support technique est mis à votre disposition au :

LOGICOM
55 Rue de Lisbonne
75008 PARIS
01 48 63 59 28
www.wheeme.com

6 Utilisations avancées

Pour retourner en mode normal avec une zone de massage plus réduite vous devez :

- Soit positionner votre WheeMe à l'horizontal comme sur la photo ci-dessous et sélectionner en même temps le programme désiré à l'aide du bouton **ON/OFF**
- Soit éteindre puis rallumer le WheeMe à l'aide du bouton **ON/OFF**.



7 Précautions d'utilisation

1. Il se peut que occasionnellement les cheveux trop longs se prennent dans les roues du WheeMe. Pour éviter tout risque, veillez à positionner vos cheveux comme indiqué sur la photo ci-contre.



7 Précautions d'utilisation

15. Le WheeMe ne doit pas être lavé à l'eau ou humidifié en aucun cas. Il doit être nettoyé selon les consignes décrites en fin de manuel.
16. Si des rougeurs ou des irritations apparaissent durant l'utilisation du WheeMe. Stoppez immédiatement l'utilisation et parlez en à votre médecin.
17. Lorsque vous transportez le WheeMe. Veuillez retirer les piles afin d'éviter que l'appareil s'allume inopinément.
18. Gardez le WheeMe à l'abri de la chaleur et des rayonnements du soleil.
19. Nous ne sommes pas responsables des lésions corporelles subies à la suite d'une utilisation non conforme à celles décrites dans ce manuel.
20. L'utilisation du WheeMe proche du visage ou d'organes sensibles du corps pourrait blesser l'utilisateur. Vous devez être prudent et prendre des mesures de protection appropriées.

11 Conditions de garantie

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Pour des raisons de sécurité, seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux article 1641 et suivants du Code Civil